


WEIBLICHER PYRAMIDENFÖRMIGER ADAPTER 1K175

MONTAGE :

Jedes Teil mit 4 Löcher M5 –
Achsenabstand 30 mm
(z.B. 1K95)

Adapter 1K175

1K161
1K206
1D38

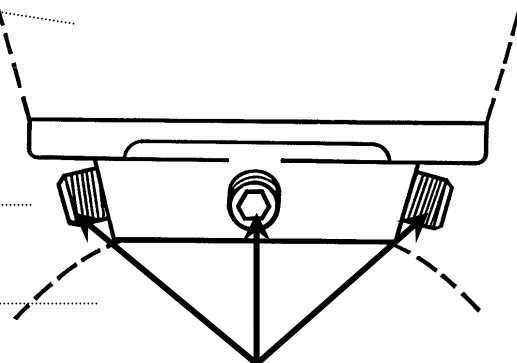

Drehmoment : 6 Nm

Nach der Einstellung der 4 Schrauben, empfehlen wir sehr diese Schrauben mit einem mittel starken Klebstoff (Ref. Proteor XC047) zu sichern.

VERWENDUNG :

Patienten bis zu 60 kg.
Jede Aktivität.


FEMALE PYRAMID CONNECTOR 1K175

ASSEMBLING

Any component with
4 holes M5 with
center distance 30 mm
e.g. : 1K95

Connector 1K175

1K161
1K206
1D38

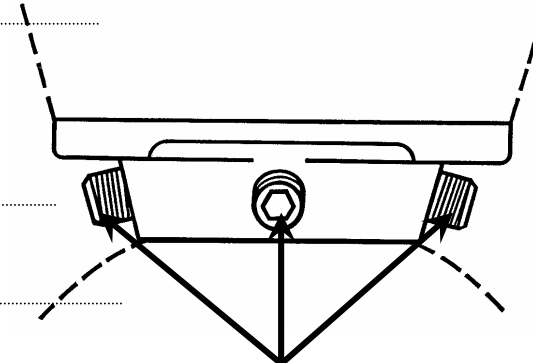

Tightening torque : 6 Nm

When the 4 screws are adjusted, it is highly recommended to fix them with an average strength adhesive :
- Protéor ref. XC047.

USE

This connector is suitable for patients weighing no more than 60 Kg and having an average activity.



1K17599-06/98


CONNECTEUR FEMELLE PYRAMIDAL 1K175

MONTAGE :

Toute pièce possédant
4 trous taraudés M5
d'entraxes 30 mm
Ex : 1K95

Connecteur 1K175

1K161
1K206
1D38

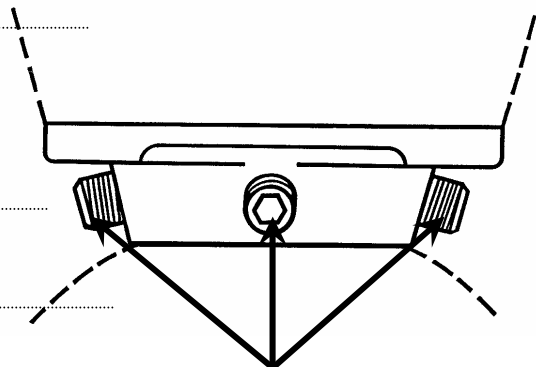

Couple de serrage 6 Nm

Une fois les 4 vis réglées, il est vivement recommandé de les condamner en utilisant une colle frein filet moyen :
- référence Protéor XC047.

UTILISATION

Ce produit convient à des patients d'un poids maximum de 60 Kg. Pour tout type d'activité.



1K17599-06/98


CONECTADOR HEMBRA PIRAMIDAL 1K175

MONTAJE:

Piezas con 4 orificios M5
de entre ejes 30mm.
ej. 1K95

Conector 1K175

1K161
1K206
1D38

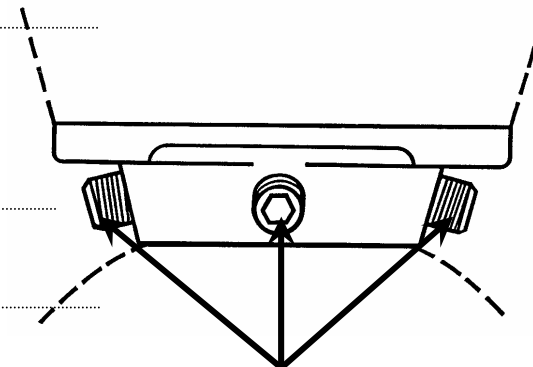

Pareja de ajuste : 6 Nm

Una vez ajustados los cuatro tornillos, se recomienda bloquearlos utilizando una cola freno hilo medio.
- Referencia Protéor XCO47.

USO

Este producto conviene a pacientes de un peso máximo de 60 Kg y para todo tipo de actividad.